

Intensiv ZirconCut

Wissenschaftlich geprüft von Prof. Mutlu Özcan, Universität Zürich

Neu



Intensiv Spezial-Diamantinstrumente für effizienteres Trennen von Zirkonoxidkeramik-Restaurationen

Entwickelt in Kooperation mit Prof. Mutlu Özcan, Universität Zürich



Intensiv ZirconCut Set, Ref. 035A

- Mit je 1 Instrument
- Zylinder flach 90°, 6mm, 014
- Zylinder rund, 6mm, 014
- Zylinder Flamme, 5mm, 014

Vorteile

- Trennt Zirkonoxidkeramik signifikant schneller*
- Länger und konstant höhere Schleifleistung der Instrumente*
- Mit 10 Instrumentanwendungen 23 mm Zirkonoxidkeramik schleifen*



Vorbereitung zum bukkalen Trennen einer Molar-Vollkeramikkrone aus Zirkonoxid



Vorbereitung zum okklusalen Trennen einer Molar-Vollkeramikkrone aus Zirkonoxid




Vorbereitung zum labialen Trennen einer Frontzahn-Vollkeramikkrone aus Zirkonoxid



Erster Inzisalkantenschnitt nach 5 Sekunden Schleifleistung

* Erster Instrumenteneinsatz: Intensiv Instrumente schleifen in 45 Sekunden 3 mm Zirkonoxidkeramik verglichen zu 1,6 mm von vergleichbaren Instrumenten deutscher Dentalindustrie.
 * Nach 10 Instrumenteneinsätzen: Intensiv Instrumente schleifen in 45 Sekunden noch 2 mm Zirkonoxidkeramik verglichen zu 0,8 mm von vergleichbaren Instrumenten deutscher Dentalindustrie.

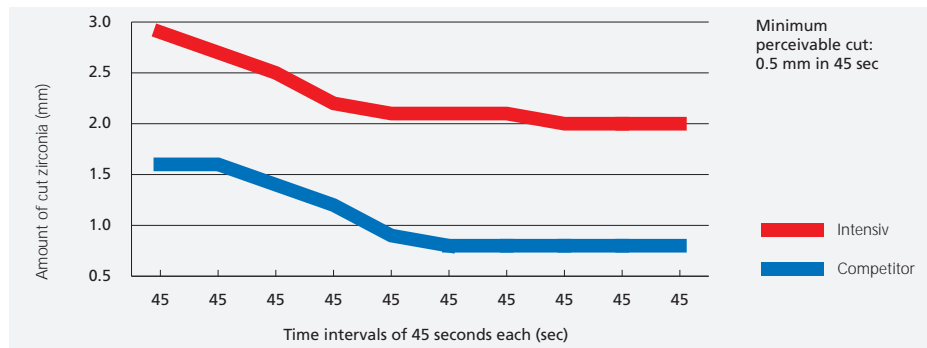

*Prof. Mutlu Özcan, wissenschaftliche Studie an der Zahnklinik der Universität Zürich


Klinische Bilder: Dr. Alessandro Devigis, Bülach, Schweiz, www.dentlist.ch



Faxbestellung: 044 838 65 66 oder E-Mail: info@demadent.ch

| | Produkt | Intensiv Ref. | dema dent Art. Nr. | dema dent Verkaufspreis CHF | Menge |
|-----------|---|---------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| ø 014 | Intensiv ZirconCut, Set mit 3 unterschiedlichen Instrumenten (in rostfreiem Stahl-Tray) Zylinder flach 90°, 6mm, 014 Zylinder rund, 6mm, 014 Zylinder Flamme, 5mm, 014 | Ref. 035A | 761136 | 81.70 | |
| | Intensiv ZirconCut, 3 Instrumente Zylinder flach 90°, 014, 6mm (in rostfreiem Stahl-Tray) | FG Zr01/3 | 761138 | 81.70 | |
| | Intensiv ZirconCut, 3 Instrumente Zylinder rund, 014, 6mm (in rostfreiem Stahl-Tray) | FG Zr02/3 | 761139 | 81.70 | |
| | Intensiv ZirconCut, 3 Instrumente Zylinder Flamme, 014, 5mm (in rostfreiem Stahl-Tray) | FG Zr03/3 | 762000 | 81.70 | |
| ø 016 | Intensiv ZirconCut, Set mit 3 unterschiedlichen Instrumenten (in rostfreiem Stahl-Tray) Zylinder flach 90°, 6mm, 016 Zylinder rund, 6mm, 016 Zylinder Flamme, 5mm, 016 | Ref. 040A | 761137 | 81.70 | |
| | Intensiv ZirconCut, 3 Instrumente Zylinder flach 90°, 016, 6mm (in rostfreiem Stahl-Tray) | FG Zr05/3 | 762001 | 81.70 | |
| | Intensiv ZirconCut, 3 Instrumente Zylinder rund, 016, 6mm (in rostfreiem Stahl-Tray) | FG Zr06/3 | 762002 | 81.70 | |
| | Intensiv ZirconCut, 3 Instrumente Zylinder Flamme, 016, 5mm (in rostfreiem Stahl-Tray) | FG Zr07/3 | 762003 | 81.70 | |

| | |
|---------------|--------------|
| Praxisstempel | Datum |
| | Unterschrift |

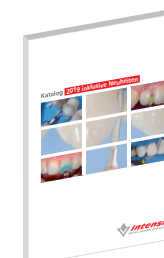

Senden Sie mir bitte den Intensiv Katalog